

Túi ổn định

Khăn lau vô trùng

Khăn lau được tẩm dung dịch vô trùng, diệt khuẩn và khử trùng sử dụng cho 1 lần lau

Ngăn đựng túi bảo vệ khăn lau và hiệu quả sản phẩm vô thời hạn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Lấy túi ra khỏi túi bảo vệ đầu tiên. Với túi bên trong còn nguyên vẹn, cuộn túi giấy bạc / ngăn chứa chất lỏng và để mạnh xuống để làm vỡ chất lỏng thông qua tấm chặn bên trong. Để một phút cho dung dịch thẩm thấu vào khăn. Lấy túi chứa khăn ra khỏi túi thứ 2. Xé mở theo phần đường kẻ trên túi để lấy khăn. Sử dụng kỹ thuật lau được khuyến nghị để làm sạch và khử trùng bề mặt.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT:

Xơ 1 lớp. 68gsm Polyester (45%) / Chất liệu cellulose (55%). 230mm x 230mm (9 "x 9"). Độ dày 0,32mm.

LƯU TRỮ:

Lưu trữ trong bao bì gốc tránh ánh sáng mặt trời và nhiệt độ. Thông tin đầy đủ về việc lưu trữ và xử lý có sẵn trên Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

SỬ DỤNG AN TOÀN:

Luôn mang gang tay, kính bảo hộ hoặc mặt nạ bảo vệ. Luôn đọc nhãn dán và MSDS trước khi sử dụng.

VẬT LIỆU TƯƠNG THÍCH:

Ứng dụng các giải pháp, khi sử dụng đúng theo chỉ dẫn sẽ không gây ảnh hưởng đến các vật liệu thường gặp trong phòng sạch. Xem thông tin tương ứng trong tệp kỹ thuật.

LỢI ÍCH:

- HA (Hypochlorous Acid) thích hợp cho quá trình chuyển giao vô trùng.
- Công thức được xác nhận đầy đủ.
- Thời gian tác dụng <60 giây.
- Thời hạn sử dụng là 10 tiếng.
- Quy cách thiết kế của khăn lau làm giảm sự hao phí khi lau.
- Sự kết hợp giữa QN, QT, OX và HA là những sản phẩm luân chuyển lý tưởng.
- InSpec HA được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP trong phòng sạch ISO 6. Sản phẩm được thực hiện và giới hạn trong môi trường ISO lớp 5.
- Khăn lau vô trùng cho đến khi được sử dụng.
- Nhiều mẫu mã dùng cho phòng sạch.
- Sản phẩm tiêu chuẩn GMP.
- Dung dịch được lọc qua bộ lọc 0,2 micron và gamma được chiếu xạ theo quy trình được xác nhận (ở mức 25-45kGy) để đưa ra mức đảm bảo vô trùng SAL là 10^{-6} .

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

Đặc tính của khăn lau được trình bày trong 5 đoạn mô tả sau:

OX là chất diệt trùng điều chế từ Hydro Peroxid 6% / Axit Peracetic 0,4% v / v. Thời gian cần để đạt hiệu quả là 2 phút. Thời hạn sử dụng 2 năm.

HA là chất diệt khuẩn điều chế từ axit Hypoclorơ. Xử lý an toàn, ít mùi, ít cặn. Thời gian cần để đạt hiệu quả là 1 phút. Thời hạn sử dụng 1 năm.

QT là chất khử trùng amoni bậc 4. Hoạt động nhanh, không oxy hóa. Thời hạn sử dụng là 2 năm.

AN là chất khử trùng amin bậc 3. Là một chất có khả năng diệt khuẩn phổ nhanh và rộng, ít cặn, không QUAT. Thời hạn sử dụng là 2 năm.

Chất khử trùng/ Chất tẩy rửa được pha loãng với nước WFI.

Khăn lau InSpec được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP trong phòng sạch ISO 6. Sản phẩm được thực hiện và giới hạn trong môi trường ISO lớp 5.

Túi ổn định InSpec™			
Sản phẩm	Quy cách đóng gói	Kích cỡ vỏ	Mã sản phẩm
InSpec™ HA Burstable Pouch	15 khăn lau / túi	20 pch	HAPW50BP15S
InSpec™ OX Burstable Pouch	15 khăn lau / túi	20 pch	OXPW40BP15S
InSpec™ AN Burstable Pouch	15 khăn lau / túi	20 pch	ANWFI20BP15S
InSpec™ QT Burstable Pouch	15 khăn lau / túi	20 pch	QTWFI30BP15S


Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam



Hướng dẫn sử dụng:



- 1 Với bao bì bên ngoài, hãy cuộn từ từ đầu chất lỏng để tạo áp lực ép chất lỏng qua vách ngăn để có thể làm ướt khăn lau.

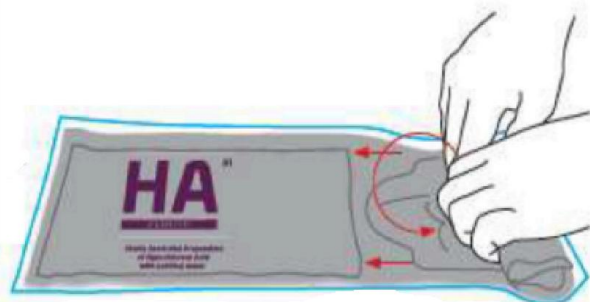

- 2 Với bao bì bên ngoài, hãy cuộn từ từ đầu chất lỏng để tạo áp lực ép chất lỏng qua vách ngăn để có thể làm ướt khăn lau.




- 3 Đảm bảo phần chất lỏng được đẩy qua hết phần khăn lau.




- 4 Chờ một phút.

1 phút

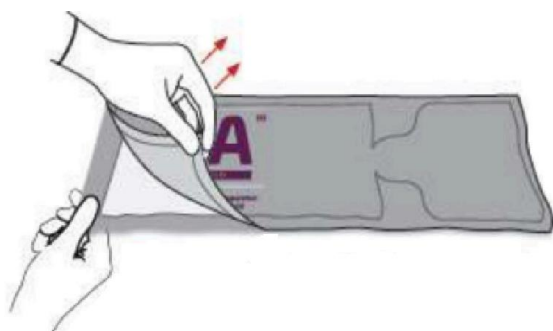

- 5 Mở túi ở phần đầu khăn.

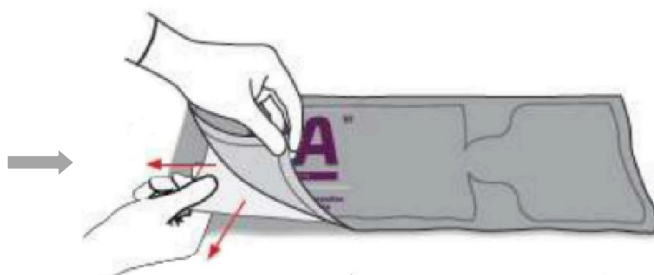

- 6 Sử dụng trong vòng 10 giờ, cần phải được bọc lại khi không sử dụng.



Burstable Pouch Sterile Session Wipes

A complete range of sterile sporicidal, biocidal and detergent wipes in a session wipe.

Pouch compartments maintain wipe and product efficacy for full shelf life.



USE INSTRUCTIONS:

Remove the pouch from the outer dust bag. With the inner bag intact, roll the foil pouch/liquid compartment and apply downward pressure to burst the liquid through the frangible seal. Leave for one minute to saturate the wipes. Remove the foil pouch from the outer bag. Tear open the end of the bag and peel open the foil pouch to gain access to the wipes. Use a recommended wiping technique to clean and disinfect the surface.

TECHNICAL WIPE DATA:

Lint Grade 1. 68gsm Polyester (45%) / Cellulose (55%) material.
230mm x 230mm (9" x 9").
Thickness 0.32mm.

STORAGE:

Store in original packaging away from sunlight and extremes of temperature. Full information on the storage and handling is available on the Material safety Datasheets (MSDS)

SAFE HANDLING:

Always wear gloves and goggles or face protection. Always read the label and MSDS before use.

MATERIAL COMPATIBILITY:

Application of solutions, when used as directed, will not affect materials normally encountered in the cleanroom. See compatibility information in the Technical File.

BENEFITS:

- HA (Hypochlorous Acid) suitable for the aseptic transfer process.
- Fully validated formulations
- <60 seconds activation time
- In-use shelf life of 10 hours
- Session wipe format minimises waste
- Any combination of AN, QT, OX and HA are ideal rotational partners
- Manufactured to GMP in an ISO 6 cleanroom. The product is filled and capped in an ISO class 5 environment.
- Sterile wipes until the point of use.
- Multiple bags for cleanroom transfer
- Manufactured to GMP
- The solution is filtered through a 0.2 micron filter and aseptically filled into pre-gamma irradiated packaging (25-45kGy) and tested to give a sterility assurance level SAL of 10~6

SPECIFICATION:

The burstable wipes are available in a choice of five presentations: -

OX Sporicidal preparation of Hydrogen Peroxide 6%/Peracetic Acid 0.4% v/v. Rapid action 2 minute kill time. 2 year shelf life.

HA Sporicidal preparation of Hypochlorous Acid. A safe handling, low odour, low residue. Rapid action 1minute kill time. 1 year shelf life.

QT Biocidal quaternary ammonium compound disinfectant cleaner. A rapid action, non-oxidising biocide. 2 year shelf life.

AN Biocidal diamine disinfectant. A broad spectrum, rapid action, low residue, QUAT free. 2 year shelf life.

Biocides/Detergent are diluted with WFI quality water.

InSpec wipes are manufactured to GMP in an ISO 6 cleanroom. The products are filled and sealed in an ISO class 5 environment.

InSpec™ Burstable Pouches			
Product	Pack Size	Case Size	Product Code
InSpec™ HA Burstable Pouch	15 wipes/pouch	20 pch	HAPW50BP15S
InSpec™ OX Burstable Pouch	15 wipes/pouch	20 pch	OXPW40BP15S
InSpec™ AN Burstable Pouch	15 wipes/pouch	20 pch	ANWF120BP15S
InSpec™ QT Burstable Pouch	15 wipes/pouch	20 pch	QTWFI30BP15S


Vietnam Official Distributor:

Decon Solutions Co., LTD

No 62 Road 64, Thanh My Loi Ward, District 2, HCM City, Vietnam
H: 09 0890 1955 F: +84 28 6287 3181 E: info@deconsolutions.com.vn
T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585 W: www.deconsolutions.com.vn



Instructions for Use

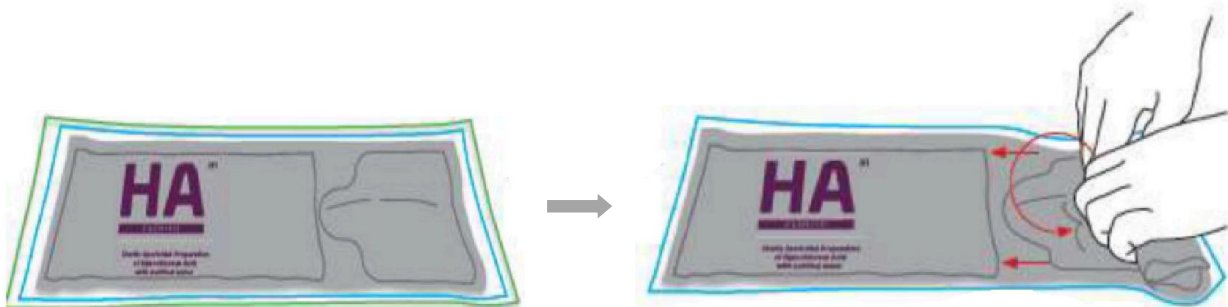

1 With outer packaging still in place roll the pouch from the liquid end and apply pressure to force liquid across the frangible barrier to wet the wipes.

2 With outer packaging still in place roll the pouch from the liquid end and apply pressure to force liquid across the frangible barrier to wet the wipes.




3 Ensure liquid agent is transferred to wipes section.




1MINUTE

4 Wait for minute, then remove the dear outer bag and access wipes.

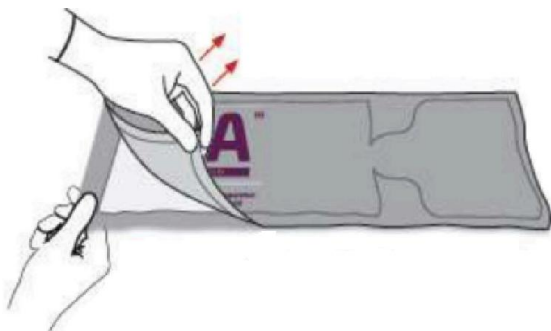

5 To access the wipes, peel the pouch open at the Wipe end of the pouch.

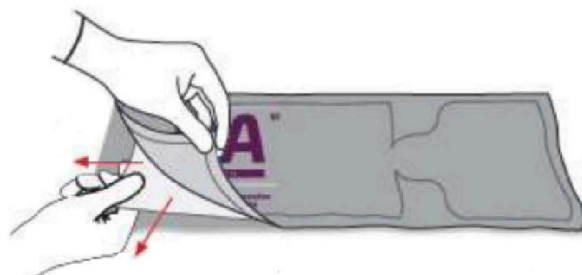

6 Use within 10 hrs, re-covering as necessary.



No 62 Road 64, Thanh My Loi Ward, District 2, HCM City, Vietnam
H: 09 0890 1955 F: +84 28 6287 3181 E: info@deconsolutions.com.vn
T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585 W: www.deconsolutions.com.vn

Vietnam Offical Distributor:

Decon Solutions Co., LTD